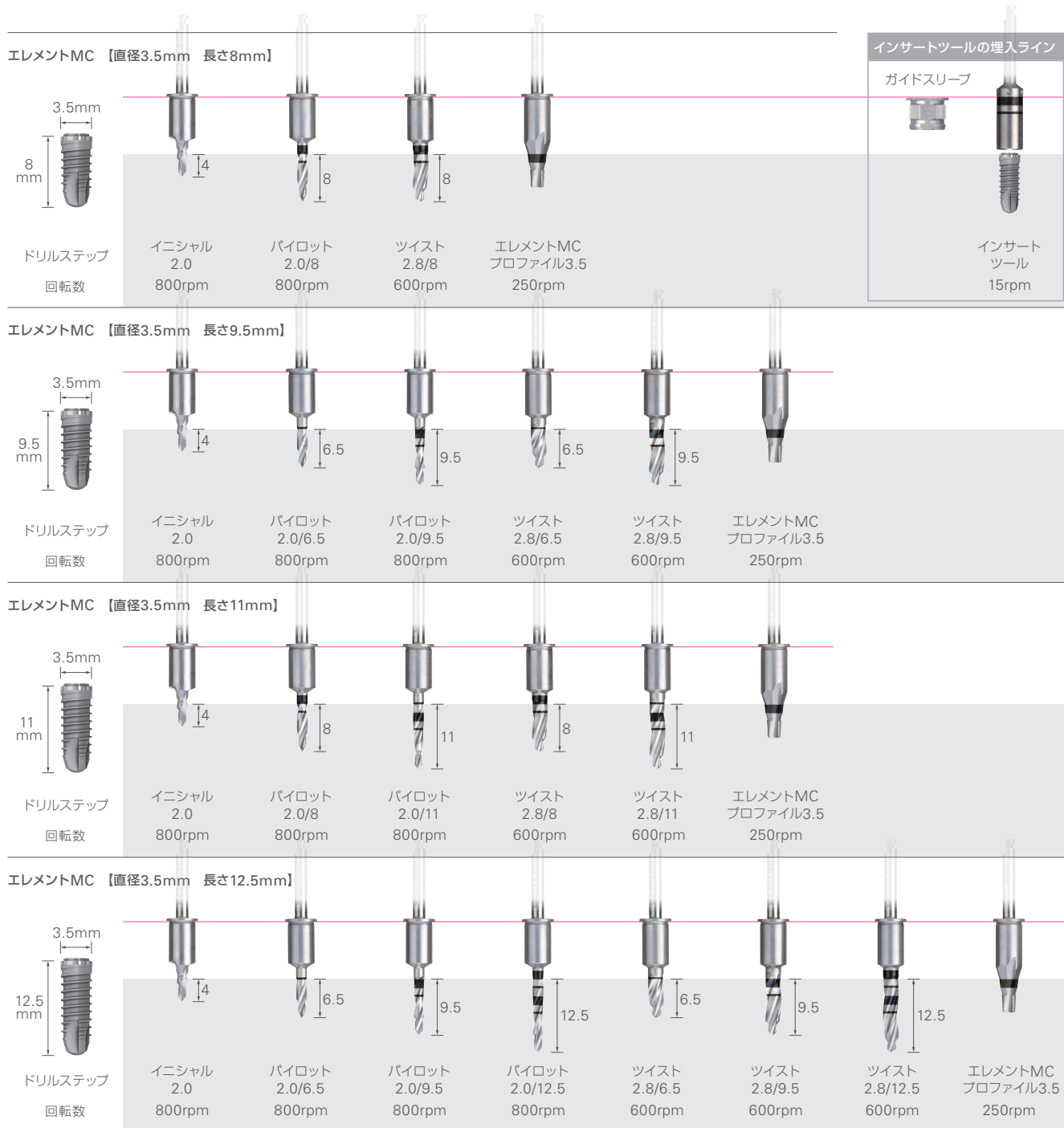
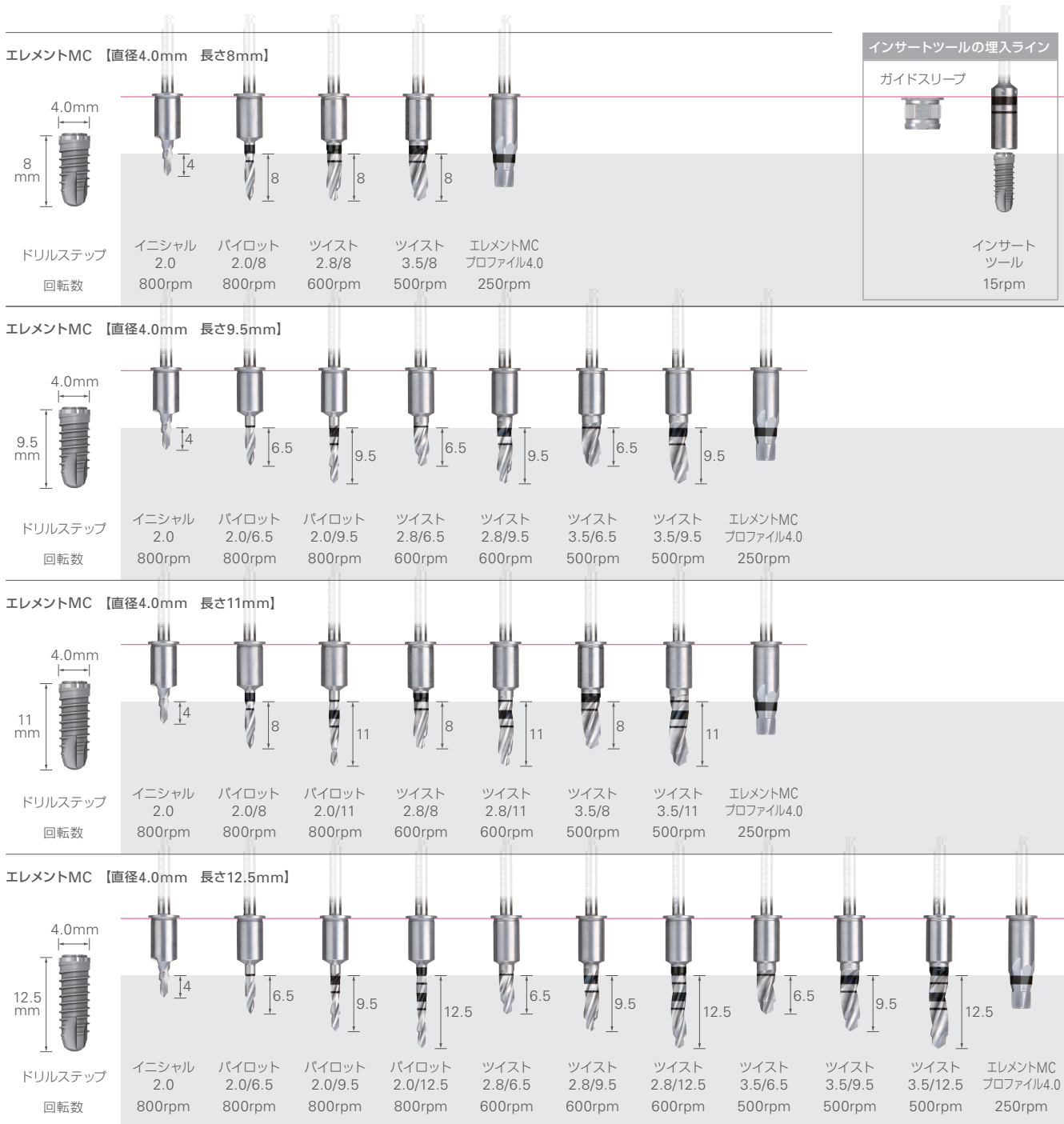


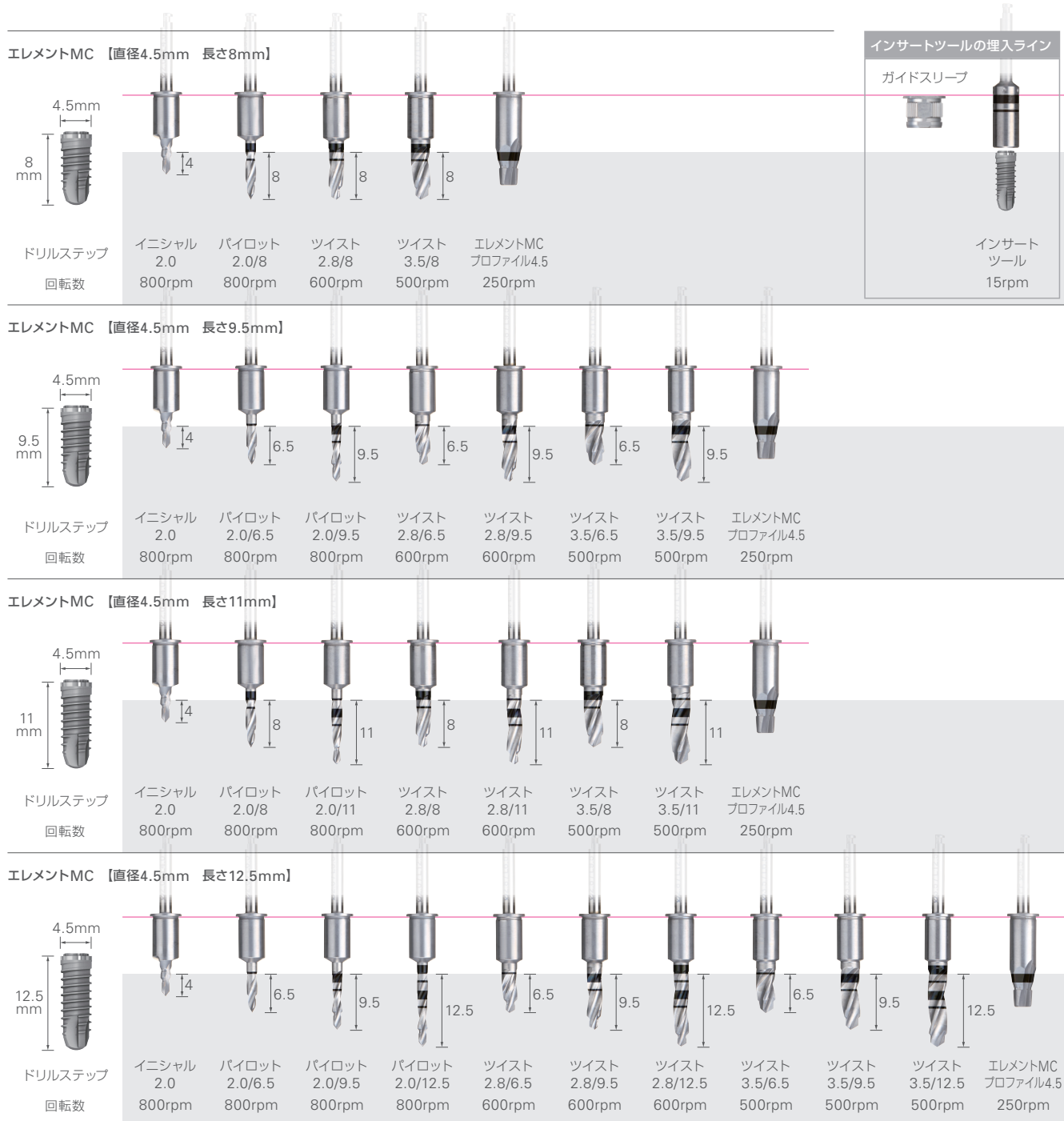
エレメントMC ドリルステップ 直径3.5mm



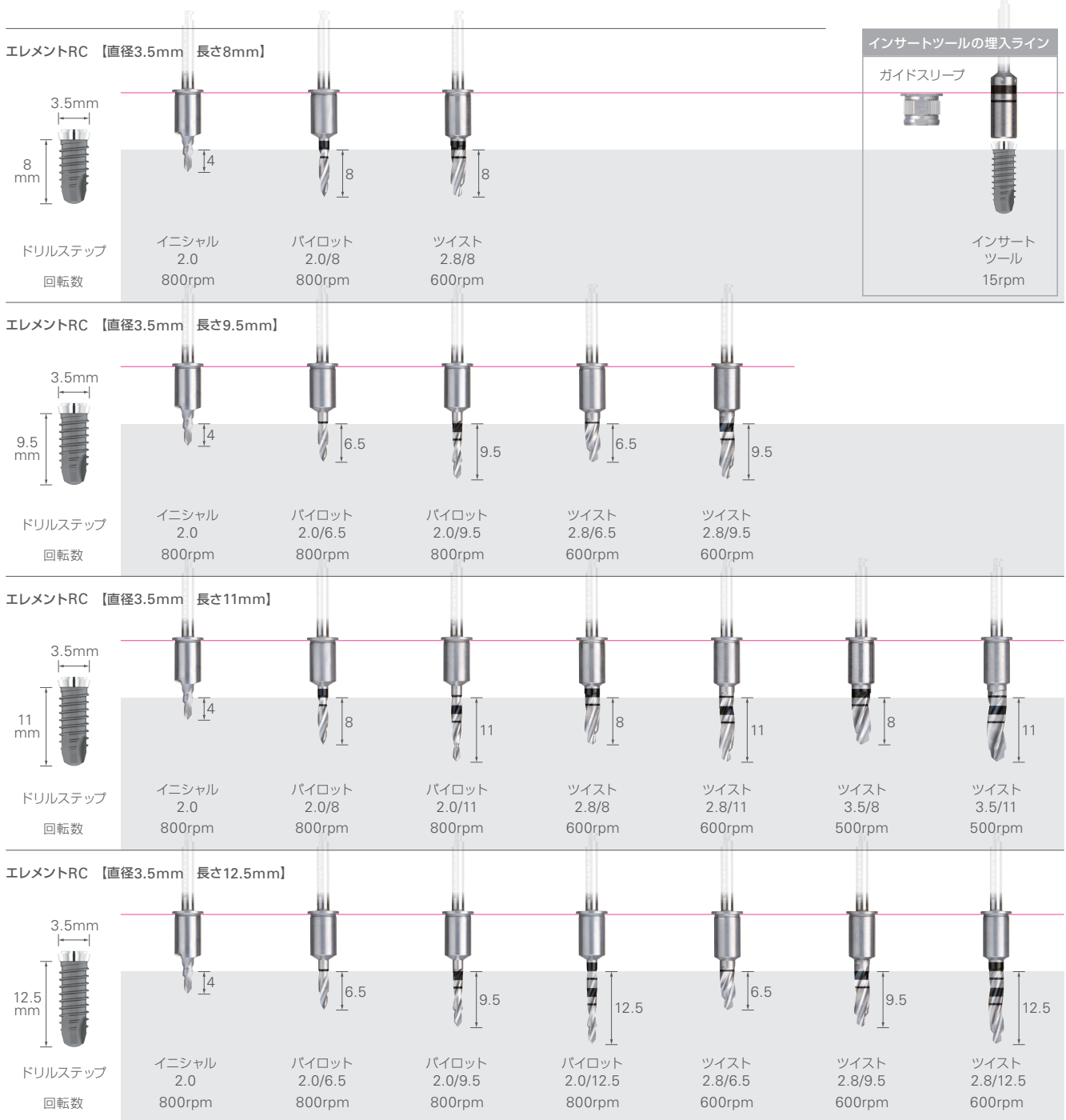
エレメントMC ドリルステップ 直径4.0mm



エレメントMC ドリルステップ 直径4.5mm



エレメントRC ドリルステップ 直径3.5mm



エレメントRC ドリルステップ 直径4.0mm

エレメントRC 【直径4.0mm 長さ6.5mm】

4.0mm
6.5mm

ドリルステップ	イニシャル 2.0	パイロット 2.0/6.5	ツイスト 2.8/6.5	ツイスト 3.5/6.5
回転数	800rpm	800rpm	600rpm	500rpm

インサートツールの埋入ライン

ガイドスリーブ

インサート
ツール
15rpm

エレメントRC 【直径4.0mm 長さ8mm】

4.0mm
8mm

ドリルステップ	イニシャル 2.0	パイロット 2.0/8	ツイスト 2.8/8	ツイスト 3.5/8
回転数	800rpm	800rpm	600rpm	500rpm

エレメントRC 【直径4.0mm 長さ9.5mm】

4.0mm
9.5mm

ドリルステップ	イニシャル 2.0	パイロット 2.0/6.5	パイロット 2.0/9.5	ツイスト 2.8/6.5	ツイスト 2.8/9.5	ツイスト 3.5/6.5	ツイスト 3.5/9.5
回転数	800rpm	800rpm	800rpm	600rpm	600rpm	500rpm	500rpm

エレメントRC 【直径4.0mm 長さ11mm】

4.0mm
11mm

ドリルステップ	イニシャル 2.0	パイロット 2.0/8	パイロット 2.0/11	ツイスト 2.8/8	ツイスト 2.8/11	ツイスト 3.5/8	ツイスト 3.5/11
回転数	800rpm	800rpm	800rpm	600rpm	600rpm	500rpm	500rpm

エレメントRC 【直径4.0mm 長さ12.5mm】

4.0mm
12.5mm

ドリルステップ	イニシャル 2.0	パイロット 2.0/6.5	パイロット 2.0/9.5	パイロット 2.0/12.5	ツイスト 2.8/6.5	ツイスト 2.8/9.5	ツイスト 2.8/12.5	ツイスト 3.5/6.5	ツイスト 3.5/9.5	ツイスト 3.5/12.5
回転数	800rpm	800rpm	800rpm	800rpm	600rpm	600rpm	600rpm	500rpm	500rpm	500rpm

エレメントRC ドリルステップ 直径4.5mm

エレメントRC 【直径4.5mm 長さ6.5mm】

ドリルステップ	イニシャル 2.0	パイロット 2.0/6.5	ツイスト 2.8/6.5	ツイスト 3.5/6.5	インサート ツール 15rpm
回転数	800rpm	800rpm	600rpm	500rpm	

エレメントRC 【直径4.5mm 長さ8mm】

ドリルステップ	イニシャル 2.0	パイロット 2.0/8	ツイスト 2.8/8	ツイスト 3.5/8
回転数	800rpm	800rpm	600rpm	500rpm

エレメントRC 【直径4.5mm 長さ9.5mm】

ドリルステップ	イニシャル 2.0	パイロット 2.0/6.5	パイロット 2.0/9.5	ツイスト 2.8/6.5	ツイスト 2.8/9.5	ツイスト 3.5/6.5	ツイスト 3.5/9.5
回転数	800rpm	800rpm	800rpm	600rpm	600rpm	500rpm	500rpm

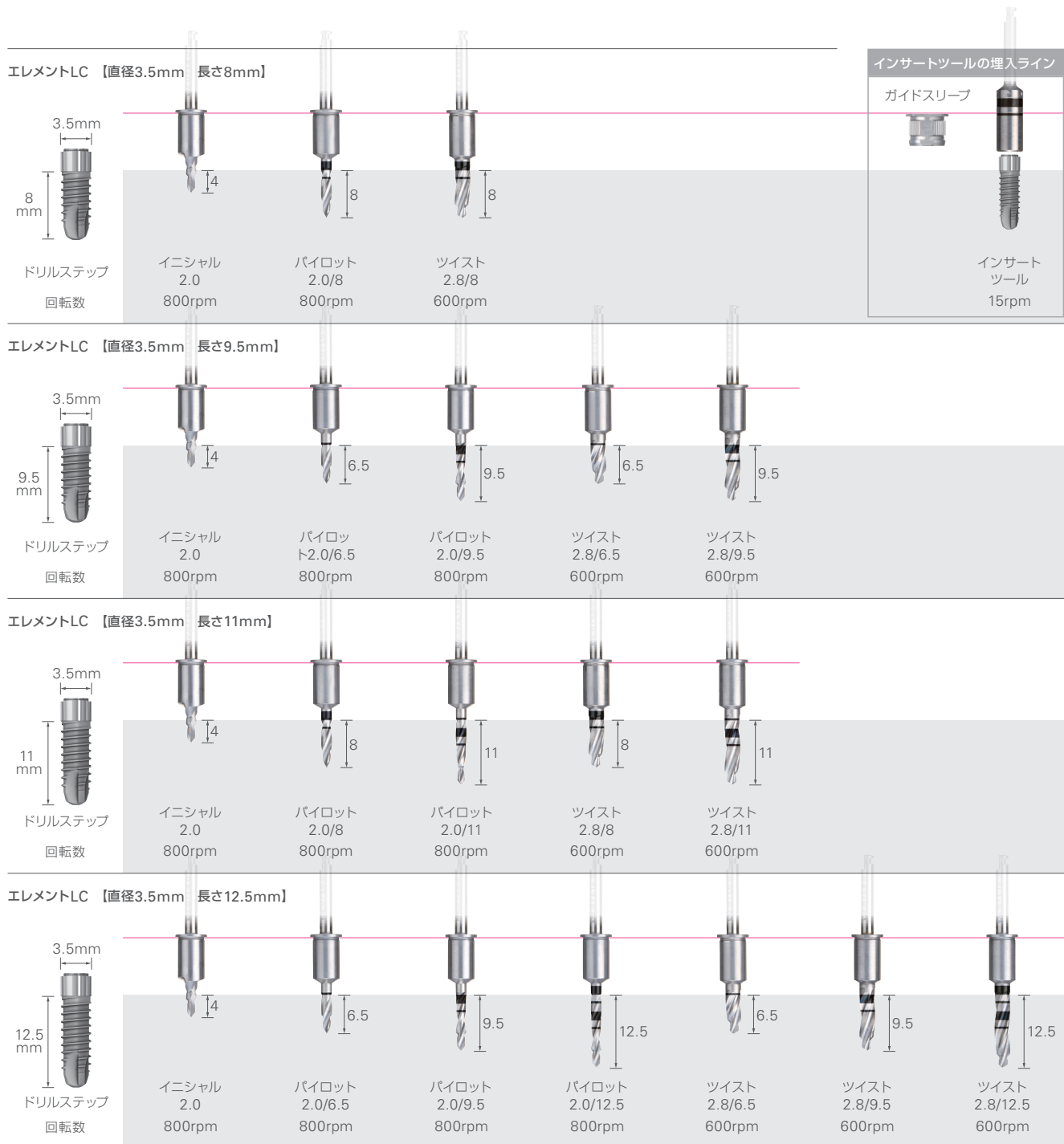
エレメントRC 【直径4.5mm 長さ11mm】

ドリルステップ	イニシャル 2.0	パイロット 2.0/8	パイロット 2.0/11	ツイスト 2.8/8	ツイスト 2.8/11	ツイスト 3.5/8	ツイスト 3.5/11
回転数	800rpm	800rpm	800rpm	600rpm	600rpm	500rpm	500rpm

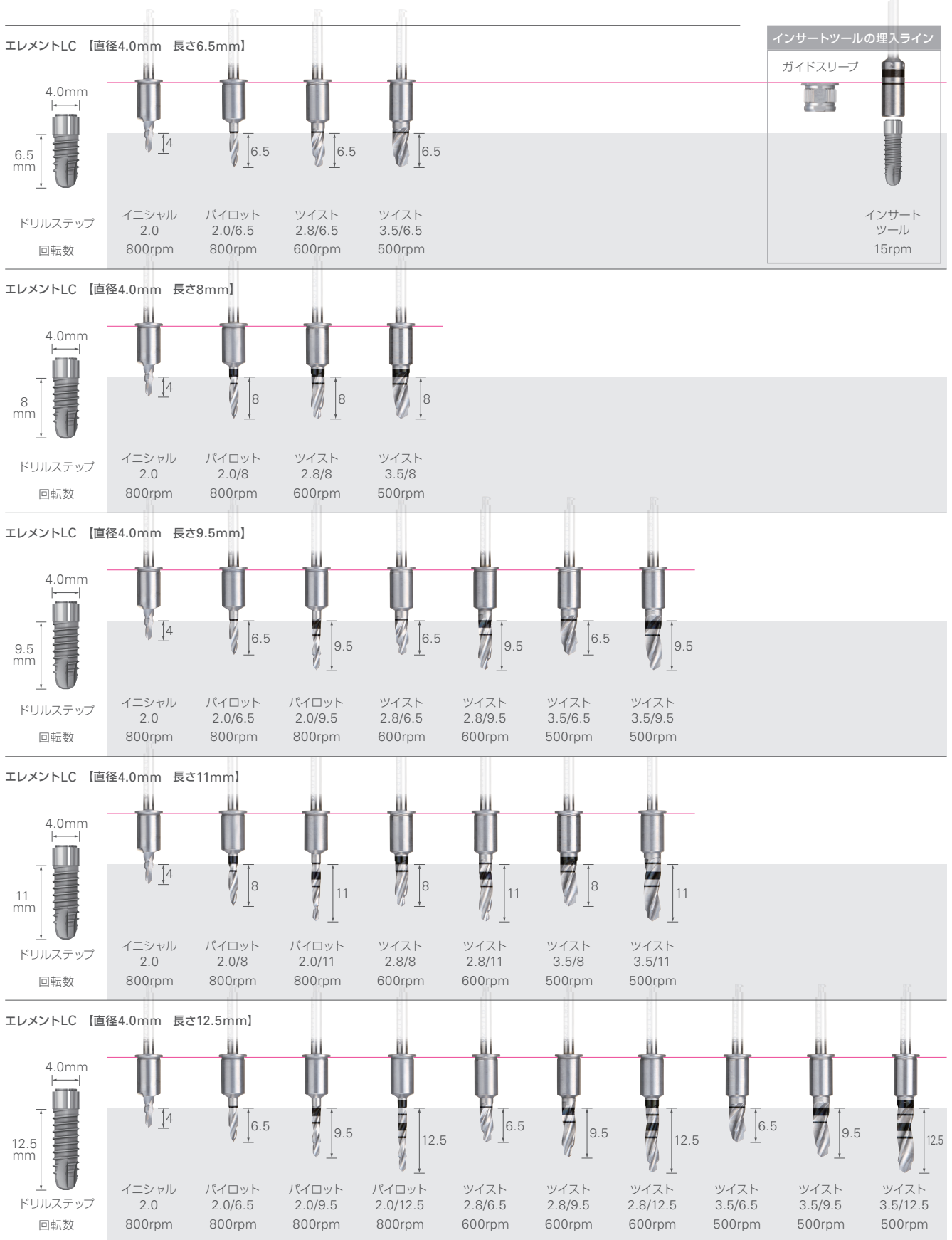
エレメントRC 【直径4.5mm 長さ12.5mm】

ドリルステップ	イニシャル 2.0	パイロット 2.0/6.5	パイロット 2.0/9.5	パイロット 2.0/12.5	ツイスト 2.8/6.5	ツイスト 2.8/9.5	ツイスト 2.8/12.5	ツイスト 3.5/6.5	ツイスト 3.5/9.5	ツイスト 3.5/12.5
回転数	800rpm	800rpm	800rpm	800rpm	600rpm	600rpm	600rpm	500rpm	500rpm	500rpm

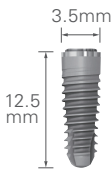


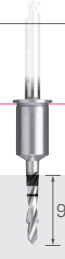


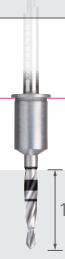

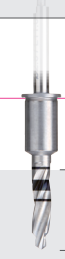






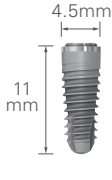











エレメントLC ドリルステップ 直径3.5mm



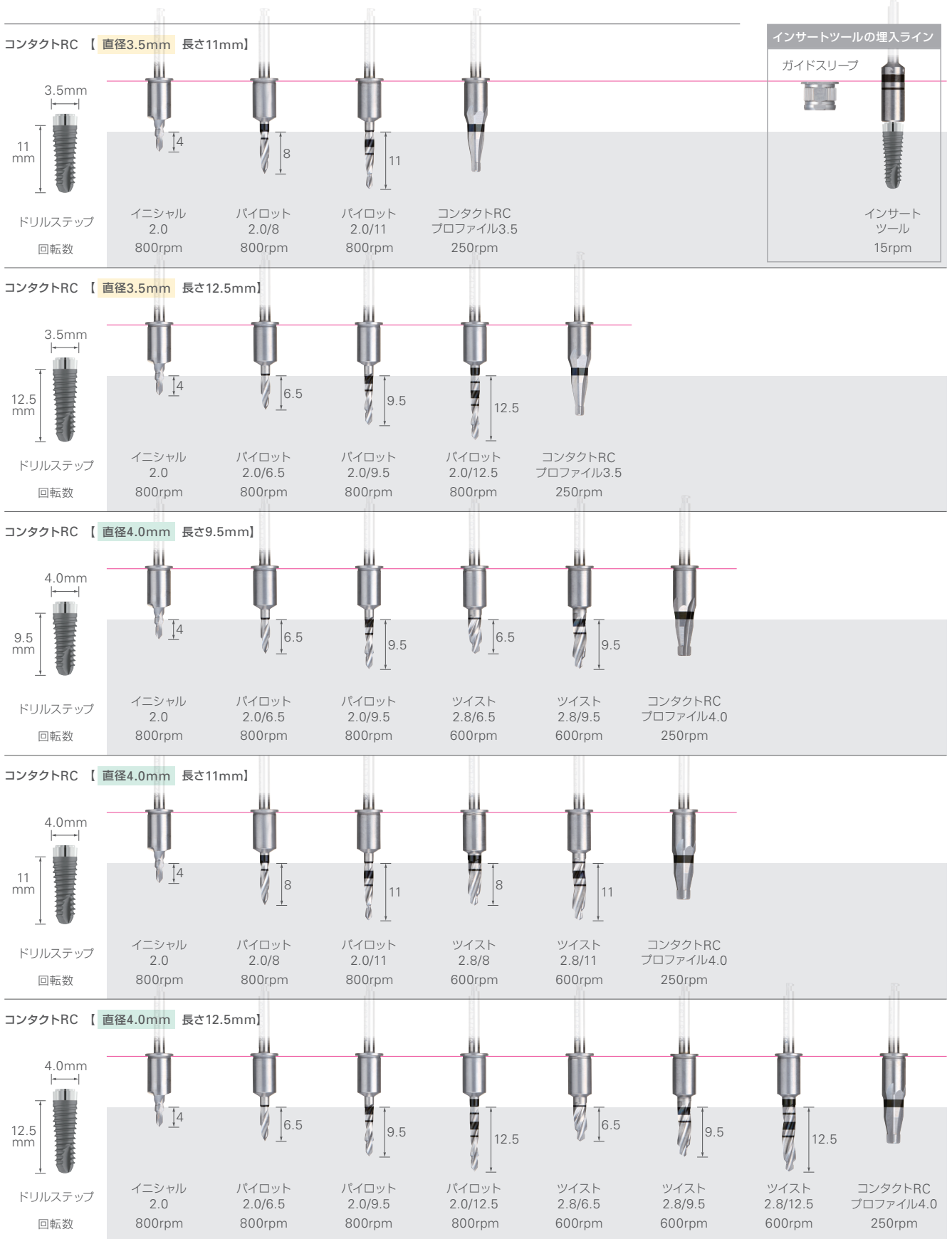
エレメントLC ドリルステップ 直径4.0mm



コンタクトMC ドリルステップ 直径3.5mm / 直径4.0mm / 直径4.5mm

コンタクトMC 【直径3.5mm 長さ12.5mm】							インサートツールの埋入ライン		
 3.5mm 12.5mm ドリルステップ 回転数						 ガイドスリーブ  インサート ツール 15rpm			
	イニシャル 2.0 800rpm	パイロット 2.0/6.5 800rpm	パイロット 2.0/9.5 800rpm	パイロット 2.0/12.5 800rpm	コンタクトMC プロファイル3.5 250rpm				
コンタクトMC 【直径4.0mm 長さ11mm】									
 4.0mm 11mm ドリルステップ 回転数						 コンタクトMC プロファイル4.0 250rpm			
	イニシャル 2.0 800rpm	パイロット 2.0/8 800rpm	パイロット 2.0/11 800rpm	ツイスト 2.8/8 600rpm	ツイスト 2.8/11 600rpm				
コンタクトMC 【直径4.0mm 長さ12.5mm】									
 4.0mm 12.5mm ドリルステップ 回転数								 コンタクトMC プロファイル4.0 250rpm	
	イニシャル 2.0 800rpm	パイロット 2.0/6.5 800rpm	パイロット 2.0/9.5 800rpm	パイロット 2.0/12.5 800rpm	ツイスト 2.8/6.5 600rpm	ツイスト 2.8/9.5 600rpm	ツイスト 2.8/12.5 600rpm		
コンタクトMC 【直径4.5mm 長さ11mm】									
 4.5mm 11mm ドリルステップ 回転数						 コンタクトMC プロファイル4.5 250rpm			
	イニシャル 2.0 800rpm	パイロット 2.0/8 800rpm	パイロット 2.0/11 800rpm	ツイスト 2.8/8 600rpm	ツイスト 2.8/11 600rpm				
コンタクトMC 【直径4.5mm 長さ12.5mm】									
 4.5mm 12.5mm ドリルステップ 回転数								 コンタクトMC プロファイル4.5 250rpm	
	イニシャル 2.0 800rpm	パイロット 2.0/6.5 800rpm	パイロット 2.0/9.5 800rpm	パイロット 2.0/12.5 800rpm	ツイスト 2.8/6.5 600rpm	ツイスト 2.8/9.5 600rpm	ツイスト 2.8/12.5 600rpm		

コンタクトRC ドリルステップ 直径3.5mm / 直径4.0mm



コンタクトRC ドリルステップ 直径4.5mm

